

三角巾は体にかぶせてお使いください

三角巾は傷病者の
プライバシーを守るために
使用します

服を全て脱がさなくても、
AEDは使用できます！

AEDのパッドは
素肌に直接
貼り付けましょう



女性に配慮したAEDの使い方

パッドを


素肌に直接貼り付ける

ことができているれば、**ブラジャーを外す必要はありません。**

服の下で下着をずらして、**右の鎖骨の下と左のわき腹のあたりに**貼ることで対応できます。

金属製品（ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等）は**パッドに触れさせない**ようにしてください。
パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。

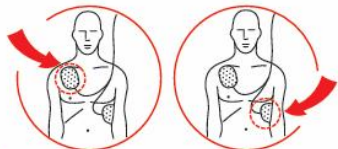

パッドを貼った後に

上から上着やタオルなどを
かけても大丈夫です。

その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬（湿布等）が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植え込まれている場合（胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える）は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

【監修】 公益財団法人日本AED財団

【出典】 東京都多摩府中保健所

【問い合わせ】 広島市健康福祉局保健部医療政策課 082-504-2178